The image shows the exterior of a multi-story hospital building during the "blue hour" of dusk. The sky is a mix of deep blues and oranges. The building is a light tan color with several windows, some of which are lit from within. A prominent sign on the upper part of the building reads "HOSPITAL DR. R. A. CALDERON GUARDIA". A balcony with a white railing is visible on the second floor. In the background, a mountain range is visible under the twilight sky.

HOSPITAL DR. R. A. CALDERON GUARDIA

Protocolo para la colocación y el retiro del equipo de protección personal

Servicio de Anestesia
Hospital Calderón Guardia
Marzo 2020





**No confié en su memoria ...
Mejor tenga un checklist**

Contenido

- Materiales
- Protocolo para la colocación
- Protocolo para el retiro

El personal



El personal

- #1 = va a ser el encargado de realizar la intubación endotraqueal
- #2 = va a ser el encargado de inyectar los medicamentos, asistir en la intubación y programar los parámetros de la máquina de anestesia o ventilador mecánico
- #3 = va ser el encargado de leer el checklist así como la supervisión del procedimiento (estará afuera)

**BAÑOS
DE
USO
RESTRICTO.**

**UTILIZAR
LOS DE
HOSPITALIZADOS**

*POR FAVOR NO ABRIR
PUERTAS NI
VENTANAS AIRE
ACONDICIONADO EN
ESTA AREA*

**SE SOLICITA AL
PERSONAL NO
TOMAR ROPA DE
ESTA AREA
GRACIAS**

AISLADOS

**SE SOLICITA AL
PERSONAL NO
TOMAR ROPA DE
ESTA AREA
GRACIAS**

Materiales/persona

- 2 pares de guantes
- 2 gorros
- 1 par de botas
- 1 bata de material impermeable
- 1 careta
- 1 anteojos de protección
- 1 máscara con estándar de protección N95
- Solución alcohólica
- Balde de agua jabonosa



#2 pares



#2 unidades



#1 par



Bata impermeable



**La ropa de tela
NO es impermeable**



#1 careta




Anteojos de protección



Máscara N95





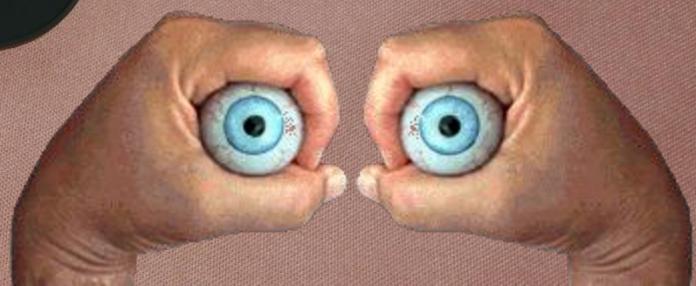





Contenido

- Materiales
- Protocolo para la colocación
- Protocolo para el retiro



**Protocolo para la colocación
del Equipo de Protección Personal**

Colocación del equipo de protección

- Debe ser supervisado siempre
- Verificar que el equipo para el baño esté completo
- Verificar que el balde con solución jabonosa se encuentre listo para el momento del retiro del equipo
- Verificar que la mascarilla tenga el filtro colocado
- Retirarse todos los accesorios (anillos, aretes, reloj) y amarrarse el pelo
- Colóquese las botas


Colocación del equipo de protección


- Colóquese la bata de protección, la cual debe ser impermeable y desechable (debe cubrir el total de la circunferencia del cuerpo)
- Colóquese la mascarilla 3M N95 (con ayuda de otra persona); primero las ligas inferiores y luego las superiores, bordeando el pabellón auricular
- Asegúrese que no hay fugas en la mascarilla y tiene buen sello. Además ajústese el puente de la nariz
- Colóquese los anteojos de protección
- Colóquese el primer gorro

Colocación del equipo de protección

- Colóquese la careta
- Colóquese el segundo gorro y verifique que las tiras queden dentro del segundo gorro
- Colóquese el segundo par de guantes asegurando que cubra sobre las empuñaduras de la bata (ayudado por otra persona)
- NO se realizará lo del lavado con agua y jabón y solución con alcohol ni cinta adhesiva sobre los guantes
- Colóquese el primer par de guantes

**Debe ser supervisado
siempre por otra persona**

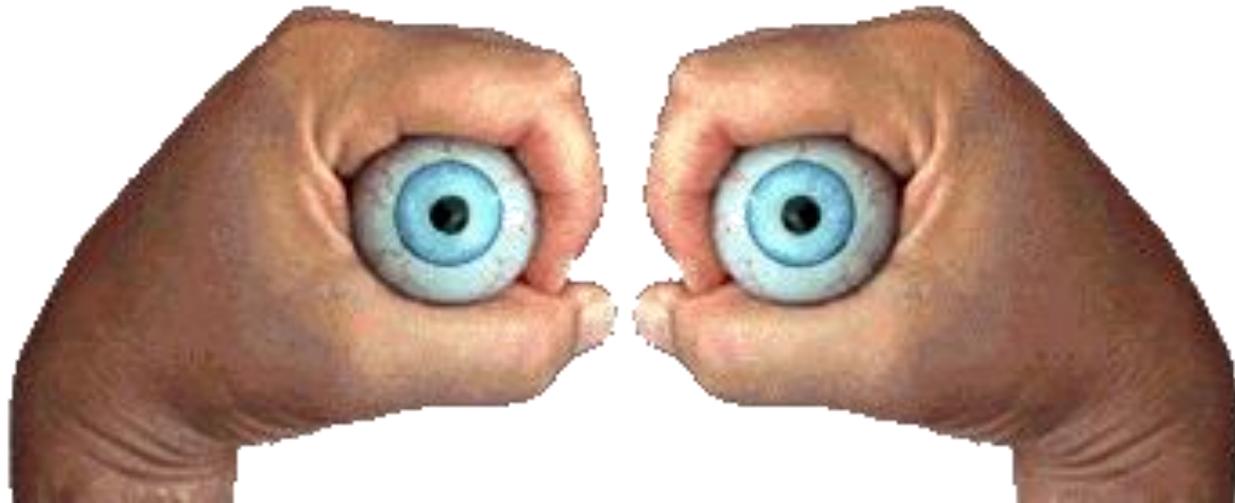

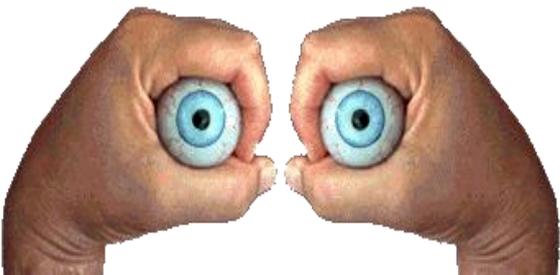


**Verificar que la mascarilla
tenga el filtro colocado**



Colóquese las botas




Colóquese el primer par de guantes

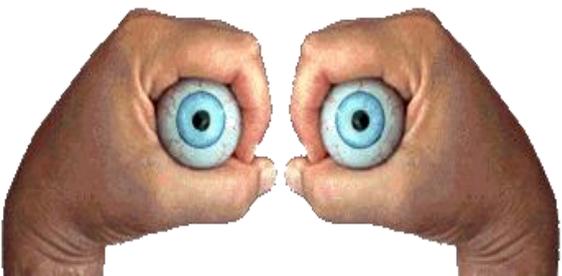

**Los guantes deben
ser quirúrgicos**




Colóquese la bata de protección

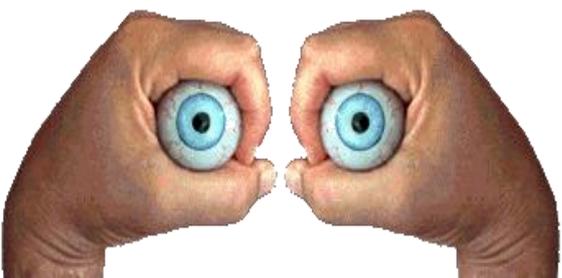

**Debe cubrir el total de la
circunferencia del cuerpo**



Colóquese la mascarilla 3M N95

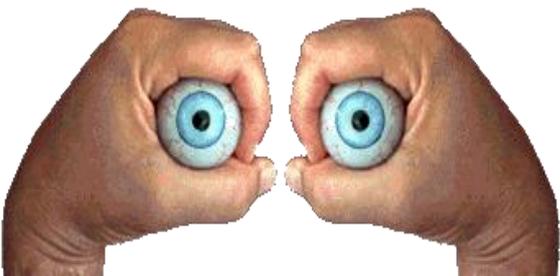

Asegúrese que no hay fugas en la mascarilla y tiene buen sello




Colóquese los anteojos de protección



Colóquese el primer gorro



Colóquese la careta

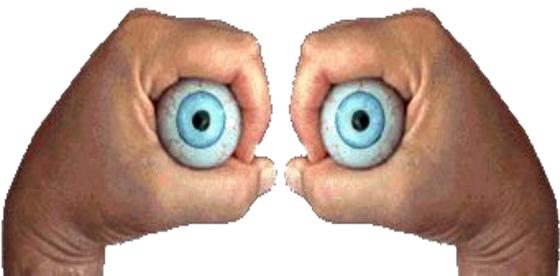


**Verifique la sujeción
de la careta**



Colóquese el segundo gorro



Colóquese el segundo par de guantes

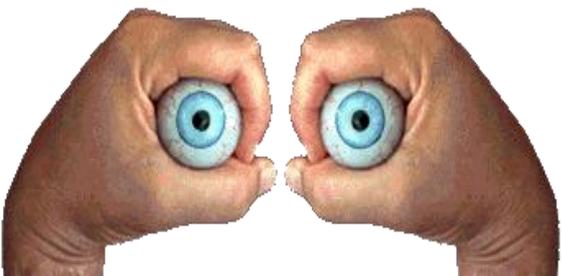

**Asegure que cubra sobre las
empuñaduras de la bata**



Todo listo para iniciar el procedimiento

Contenido

- Materiales
- Protocolo para la colocación
- Protocolo para el retiro



**Protocolo para el retiro del
Equipo de Protección Personal**

Protocolo para retirar el equipo de protección

- Debe ser supervisado siempre
- Con cuidado, rompa las cintas que sujetan la bata, jale las mangas y arrolle del interior hacia el exterior de la bata, hasta formar una bola y deseche, sin comprimir la bolsa de basura, a la vez que se retira con la bata el primer par de guantes
- Lávese el segundo par de guantes con solución alcohólica
- Retire la bota derecha y saque el pie derecho del cuarto mientras que mantiene el pie izquierdo dentro del cuarto. Repita lo mismo con el pie izquierdo
- Lávese los guantes con solución alcohólica


Protocolo para retirar el equipo de protección

- Retírese la careta de atrás hacia delante sin bajar la cabeza (colocarla en el balde con solución jabonosa)
- Lávese los guantes con solución alcohólica
- Retírese el segundo gorro
- Lávese los guantes con solución alcohólica
- Quítese los lentes de protección de atrás hacia adelante, sin bajar la cabeza y con los ojos cerrados (coloque los lentes en el balde con solución jabonosa)
- Lávese los guantes con solución alcohólica

Protocolo para retirar el equipo de protección

- Retire la mascarilla 3M N95; primero la banda superior y después la inferior, cerrando los ojos, sin agachar la cabeza. Colóquela en el balde con solución jabonosa. En el caso de la N95, primero se quita la tira inferior y después la superior
- Lávese los guantes con solución alcohólica
- Retire los guantes con técnica
- Lávese las manos con agua y jabón durante 30 a 45 segundos, en la pila y luego seque las manos con papel toalla
- Frótese las manos con solución alcohólica
- Retire la ropa verde y báñese

**Debe ser supervisado
siempre por otra persona**

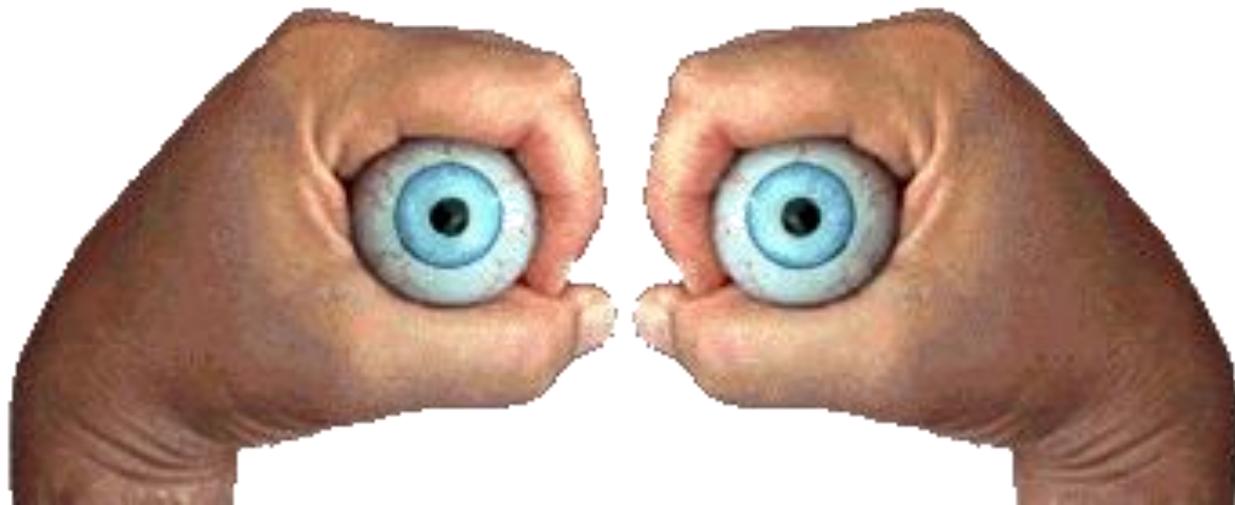




**Con cuidado, rompa las cintas
que sujetan la bata**




Jale las mangas y arrolle del interior hacia el exterior de la bata, hasta formar una bola

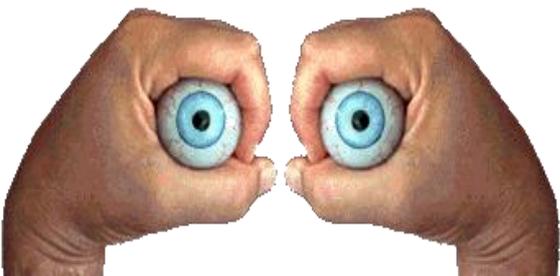

**Deseche, sin comprimir
la bolsa de basura**




**Se retira con la bata el
primer par de guantes**

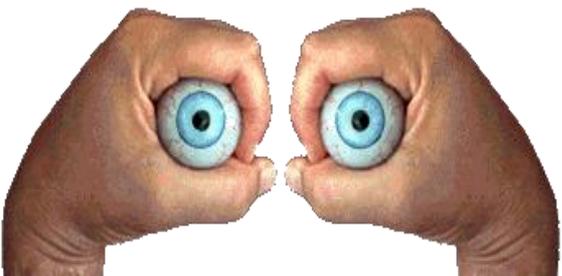

**Sin comprimir
ni sacudir la ropa**




**Lávese el segundo par de guantes
con solución alcohólica**

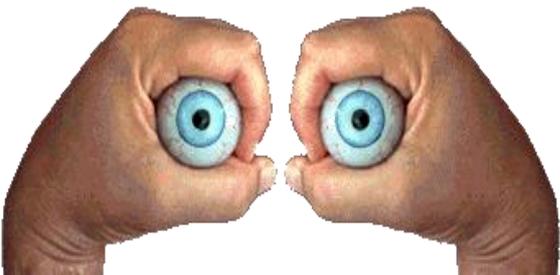

Lávese las manos con solución alcohólica después de cada retiro de equipo



Retire la bota derecha y saque el pie derecho del cuarto mientras que mantiene el pie izquierdo dentro del cuarto

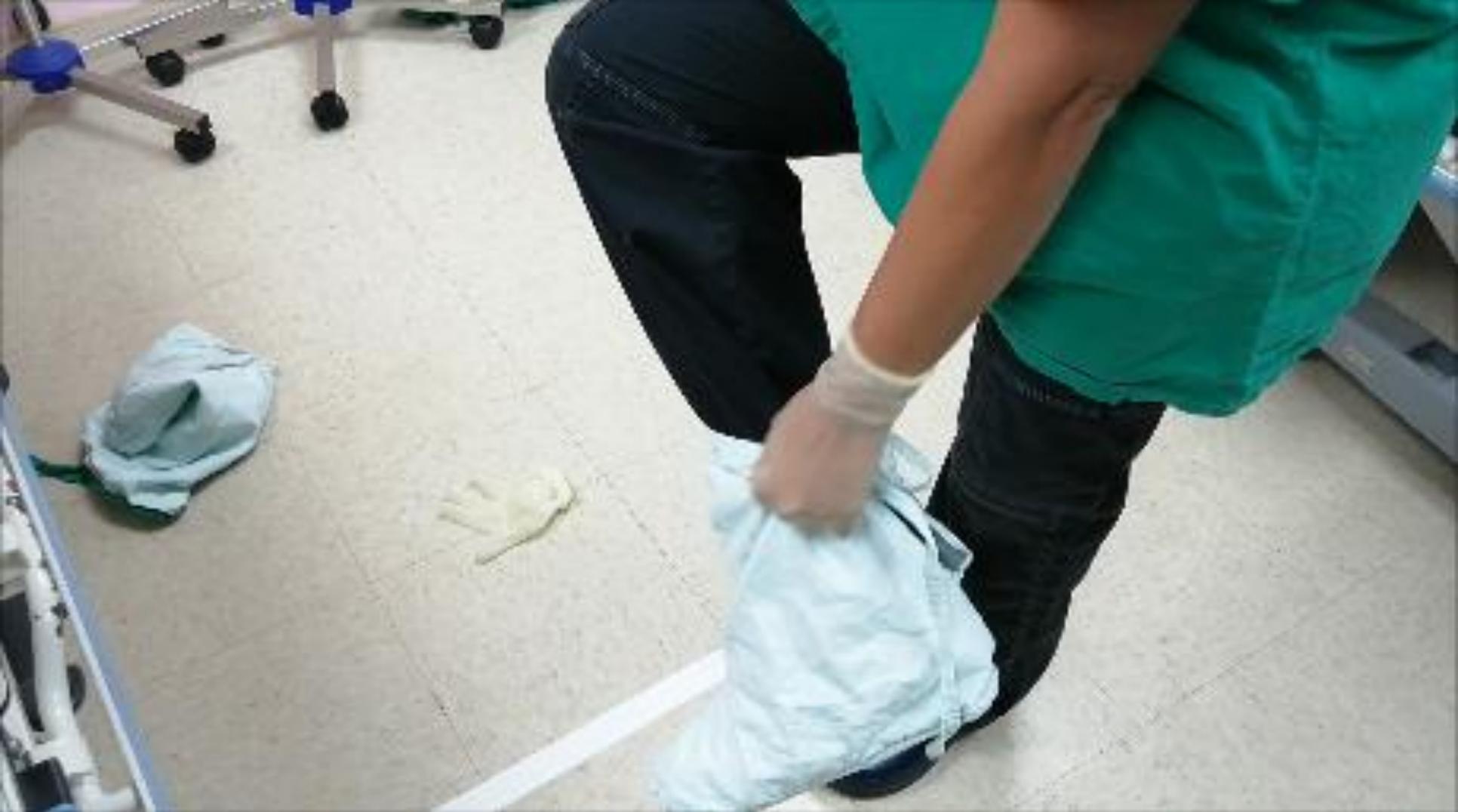


Repita lo mismo con el pie izquierdo



Lávese los guantes con solución alcohólica



**Retírese la careta de atrás hacia
delante sin bajar la cabeza**

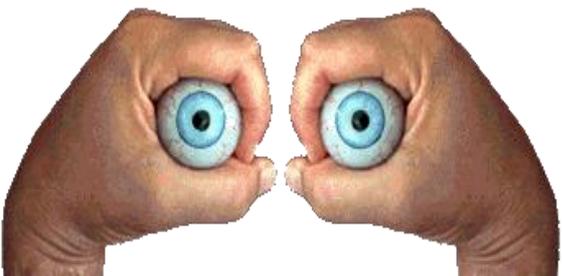

**No baje la cabeza mientras
se retira la careta**



**Coloque la careta en el balde
con solución jabonosa**



Lávese los guantes con solución alcohólica



Retírese el segundo gorro



Lávese los guantes con solución alcohólica



**Quítese los lentes de protección
de atrás hacia adelante**



Sin bajar la cabeza y con los ojos cerrados



**Coloque los lentes en el balde
con solución jabonosa**



Lávese los guantes con solución alcohólica



Retire la mascarilla 3M N95; primero la banda superior y después la inferior



**Mantenga cerrados los ojos
y sin agachar la cabeza**



En el caso de la N95, primero se quita la tira inferior y después la superior



Lávese los guantes con solución alcohólica



Retire los guantes con técnica



En este momento ya se ha retirado todo el equipo de protección personal



#1. Lávese las manos con agua y jabón durante 30 a 45 segundos, en la pila y luego seque las manos con papel toalla




#2. Frótese las manos con solución alcohólica



#3. Retire la ropa verde y báñese

A silhouette of a person with their arms raised in a 'V' shape, symbolizing victory or triumph. The person is positioned in the center, with their back to the camera. The background features a city skyline with numerous skyscrapers, partially obscured by a bright sun low on the horizon, creating a lens flare effect. The sky is a mix of light and dark tones, suggesting a sunset or sunrise. A yellow horizontal band is overlaid across the middle of the image, containing the main text.

La clave del **ÉXITO** consiste en convertir
una **DEBILIDAD** en una **FORTALEZA**

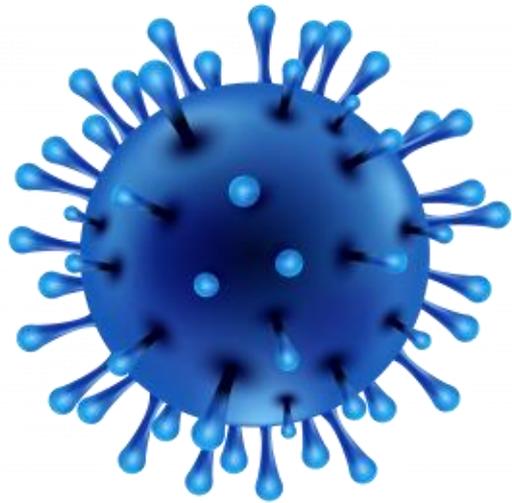

Gracias